

Desinfektion

hygienicDES 2GO

Ytdesinfektionsmedel

**Produktnamn:** hygienicDES 2GO**Produktområde:** Desinfektion**Produktbeskrivning:**

Koncentrerat ytdesinfektionsmedel.

Förpackningsenhet

2 x 2,6 l Patron

Art.-Nr. 4410300419

pH-värde:

neutral

Användningsområde:

Parfymfritt, neutralt ytdesinfektionsmedel med ett brett mikrobiologiskt spektrum av verkan mot bakterier som är relevanta för praxis. ÖGHMP och DGHM/VAH listas. Perfekt för förblötläggning av torkarskydd (i.h.s. system).


Doseringstabell

Testning enligt VAH / ÖGHMP / RKI / DVV:

Test standard	Exponerings-tid	Dosering	Last
VAH bakteriedödande / levurozid	15 Min.	0,5 %	hög
ÖGHMP bakteriedödande / levurozid	15 Min.	0,5 %	hög
RKI / DVV begränsad virucid (omslutna virus)	5 Min.	0,5 %	hög

Kompletterande tester enligt EN:

Test standard	Exponeringstid	Dosering	Last
EN 16615 bakteriedödande / levurozid	5 Min.	0,5 %	hög
EN 13727 bakteriedödande	5 Min.	0,5 %	hög

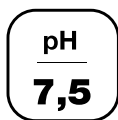



Desinfektion

hygienicDES 2GO

Ytdesinfektionsmedel

EN 13624 levurozid	5 Min.	0,5 %	hög
Desinfektion med fördränkta moppar (baserat på EN 16615) Hållbarhet: upp till 7 dagars livslängd	15 Min.	0,5 %	hög
Desinfektion mit hup DRY-Tüchern (EN 16615, 4-Felder-Test)	15 Min.	0,5 %	hög

Säkerhetsinformation:

De vanliga skyddsåtgärderna vid hantering av kemikalier måste följas. Läs alltid produktetiketten före användning. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn..

Förvaring:

Förvaras stängt och torrt vid rumstemperatur av kvalitetsskäl.

Produkt rekommendation

Optimalt utbyte: 1 multiFILL-patron för 520 liter färdig applikationslösning.

Försäljningsenhet:

Kartong

Euro pall:

78 kartonger